

NICE

INSTRUÇÕES DA FAIXA PARA ANCA



01 FAIXA PARA ANCA



02 COLOCAÇÃO

Orientar a faixa com o lado azul voltado para o corpo e prenda a correia da cintura como indicado.



03 FIXAÇÃO

Utilize a correia mais comprida para o ajuste à volta da cintura e utilize a correia elástica mais curta para o ajuste à volta da perna.



04 CONFORTO

Uma vez colocada, a faixa deve estar confortavelmente apertada, sem vincos ou dobras. Para mudar de lado, deixe a tira de Velcro da cintura apertada, mude para a outra anca como ilustrado, e aplique a correia mais curta para as pernas.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E A GARANTIA

<https://www.nicerecovery.com/instructions-for-use>

Para mais informações:

Contacte um representante do cliente através do número (888) 815-9907 ou envie um e-mail para info@nicerecovery.com

Localização:

2205 Central Ave.,
Boulder, CO 80301



ORGULHOSAMENTE
FABRICADO NO COLORADO

Visitar:

nicerecovery.com



US
SKI &
SNOWBOARD



THIS IS NICE

Fora dos Estados Unidos: Por favor, contacte o seu distribuidor local.

6-1010-01-PT REV. A

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

FAIXA PARA ANCA

Consulte um profissional de saúde antes de utilizar este produto



- Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação externa.
- Ligue o conector circular à parte de trás da unidade de arrefecimento. Ouvirá um clique quando estiver corretamente ligado.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.



- Ligue o tubo flexível à unidade de controlo. Ouvirá um clique quando estiver corretamente ligado.



- Coloque a faixa na parte do corpo adequada. Aperte com tiras de Velcro.
- Ligue o tubo flexível à faixa. Ouvirá um clique quando estiver corretamente ligado.



PASSO 1

Ligue o interruptor de alimentação na parte de trás do dispositivo. O ecrã táctil ilumina-se e apresenta o logótipo "Nice". Prima Start (Iniciar). Reveja a lista de verificação no ecrã táctil. Confirme e prima NEXT (SEGUINTE).




PASSO 2

Selecione o valor de COLD LEVEL (NÍVEL DE FRIO) pretendido e prima NEXT (SEGUINTE). (O nível 5 é a regulação mais fria).

As configurações de frio são as seguintes:

Nível 1 = 14,4 °C
Nível 2 = 12,4 °C
Nível 3 = 10 °C
Nível 4 = 7,7 °C
Nível 5 = 5,5 °C

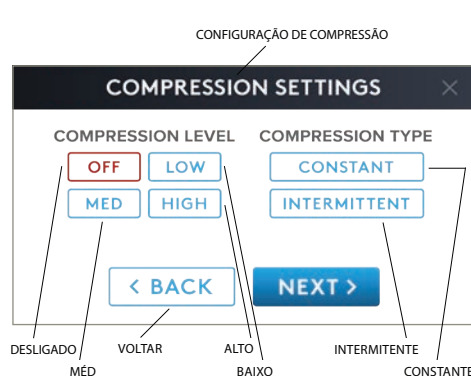

PASSO 3

Selecione os valores de COMPRESSION LEVEL (NÍVEL DE COMPRESSÃO) e o COMPRESSION TYPE (TIPO DE COMPRESSÃO) pretendidos e prima NEXT (SEGUINTE).



PASSO 4

Escolha uma configuração de tempo MANUAL de 5 a 40 minutos para uma única sessão de terapia OU escolha um PRESET PROGRAM (PROGRAMA PREDEFINIDO) para várias sessões e prima NEXT (SEGUINTE). Nota: os programas de temporização predefinidos estão numa memória de 10 ciclos.



PASSO 5

Reveja e confirme as suas configurações, premindo START (INICIAR) ou prima BACK (VOLTAR) para alterar as configurações.



PASSO 6

Durante a sessão de terapia, pode alterar as configurações de frio ou de compressão, premindo simplesmente 1 – 5 ou HIGH (ALTO), MED (MÉD) ou LOW (BAIXO). Para escurecer, prima o interruptor Dim (Escurecer), para clarear – toque no ecrã.



Cuidado: consultar os documentos fornecidos



Cuidado: a lei federal restringe a venda deste dispositivo a um médico ou por ordem deste.



Dispositivo médico



Nice Recovery Systems LLC
2205 Central Ave, Suite A
Boulder, CO 80301



Data de fabrico



Consulte o manual do utilizador, contacte um representante da assistência ao cliente através do número (888) 815-9907 ou envie um e-mail para info@nicerecovery.com



Não estéril



Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização



Não contém látex de borracha natural



Utilização múltipla num único doente



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Alemanha